


jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312

Niveau 9 (Premium)
Niveau 7 (Avancé)
Niveau 5 (Standard)

HEAR Intelligence™


optimise l'expérience auditive.

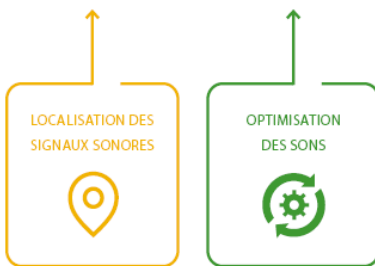

Description :

Jazz XC Pro 10 et jazz XC Pro 312 sont des intra auriculaires qui s'insèrent dans le conduit auditif pour une discrétion absolue. L'aide auditive fabriquée sur-mesure vous procurera un confort inégalé. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques : jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312		9	7	5	Descriptions / Points forts
Performances	Niveau de performance	Premium	Avancé	Standard	Dotée de 20 canaux et de programmes automatiques et manuels, cette aide auditive vous offrira des performances d'audition inégalée.
	Canaux de réglages	20	16	14	
	Programmes (AutoSurround XC/manuel/sans fil)	7/3	6/3	4/3	
Détection de l'environnement sonore	SurroundSupervisor XC	●	●	●	Analyse précise de l'environnement sonore et permet à AutoSurround XC de s'ajuster
Ajustements automatiques	Conversations dans une foule	●			Détection du son dans un environnement bruyant (discussion dans un restaurant)
	Conversations dans un petit groupe	●	●		Détection du son dans un environnement bruyant (en petit groupe)
	Musique	●	●		Programme musique avec égaliseur de son selon x types de musique
	Environnement calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme
	Conversations bruyantes	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant
	Conversations dans le calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme pendant une discussion
	Conversations dans le bruit	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant pendant une discussion
	AutoSurround XC	7	6	4	Nombre de programmes automatiques
Optimisation du son	Acclimatation intelligente	●	●	●	Evolution progressive du gain dans le temps
	SoundRestore XC	●	●	●	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	SurroundOptimizer XC	●	●	●	Optimise la compréhension vocale et le confort sonore dans les environnements bruyants.
	ConversationLift	●	●	●	Atténuation de la réverbération.
	Suppression des bruits parasites	●	●	●	Réduction haute résolution des sons gênants.
	Gestionnaire de l'effet larsen	●	●	●	Elimine les sifflements.
	Sound Impulse Manager	●	●	●	Atténuation des sons impulsionnels.
	Gestionnaire du bruit du vent	●	●	●	Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort

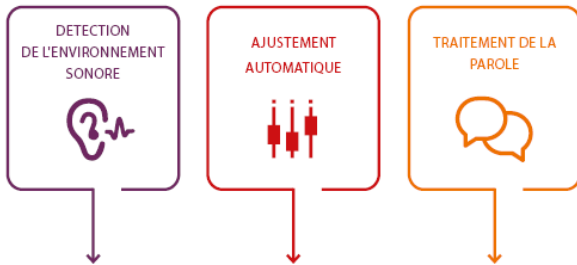


jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312

Niveau 9 (Premium)
Niveau 7 (Avancé)
Niveau 5 (Standard)

HEAR Intelligence™


optimise l'expérience auditive.

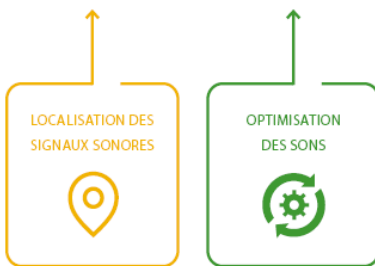

Description :

Jazz XC Pro 10 et jazz XC Pro 312 sont des intra auriculaires qui s'insèrent dans le conduit auditif pour une discrétion absolue. L'embout auriculaire fabriqué sur mesure vous procurera un confort inégalé. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques : jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312		9	7	5	Descriptions / Points forts
Performances	Niveau de performance	Premium	Avancé	Standard	Dotée de 16 canaux et de programmes automatiques et manuels, cette aide auditive vous offrira des performances d'audition inégalées.
	Canaux de réglages	20	16	14	
	Programmes (AutoSurround XC/manuel/sans fil)	7/3/5	6/3/5	4/3/5	
Détection de l'environnement sonore	SurroundSupervisor XC	●	●	●	Analyse précise de l'environnement sonore et permet à AutoSurround XC de s'ajuster
Ajustements automatiques	Conversations dans une foule	●			Détection du son dans un environnement bruyant (discussion dans un restaurant)
	Conversations dans un petit groupe	●	●		Détection du son dans un environnement bruyant (en petit groupe)
	Musique	●	●		Programme musique avec égaliseur de son selon x types de musique
	Environnement calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme
	Conversations bruyantes	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant
	Conversations dans le calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme pendant une discussion
	Conversations dans le bruit	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant pendant une discussion
	AutoSurround XC	7	6	4	Nombre de programmes automatiques
Optimisation du son	Acclimatation intelligente	●	●	●	Evolution progressive du gain dans le temps
	SoundRestore XC	●	●	●	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	SurroundOptimizer XC	●	●	●	Optimise la compréhension vocale et le confort sonore dans les environnements bruyants.
	ConversationLift	●	●	●	Atténuation de la réverbération.
	Suppression des bruits parasites	●	●	●	Réduction haute résolution des sons gênants.
	Gestionnaire de l'effet larsen	●	●	●	Elimine les sifflements.
	Sound Impulse Manager	●	●	●	Atténuation des sons impulsifs.
	Gestionnaire du bruit du vent	●	●	●	Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort
	DataLogging	●	●	●	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

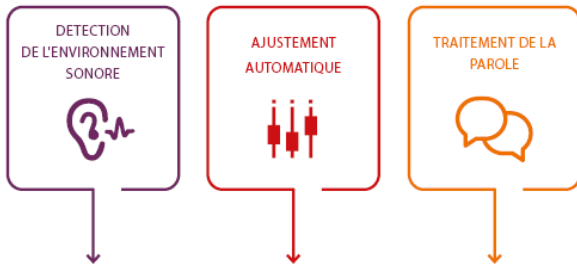


jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312

Niveau 9 (Premium)
Niveau 7 (Avancé)
Niveau 5 (Standard)

HEAR Intelligence™

optimise l'expérience auditive.

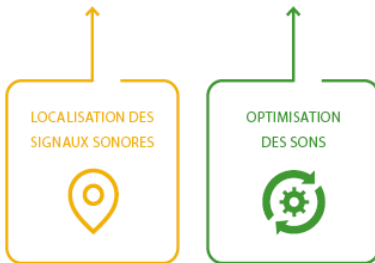

Description :

Jazz XC Pro 10 et jazz XC Pro 312 sont des intra auriculaires qui s'insèrent dans le conduit auditif pour une discrétion absolue. L'embout auriculaire fabriqué sur mesure vous procurera un confort inégalé. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques : jazz XC Pro 10 / jazz XC Pro 312		9	7	5	Descriptions / Points forts
Performances	Niveau de performance	Premium	Avancé	Standard	Dotée de 14 canaux et de programmes automatiques et manuels, cette aide auditive vous offrira des performances d'audition inégalée.
	Canaux de réglages	20	16	14	
	Programmes (AutoSurround XC/manuel/sans fil)	7/3/5	6/3/5	4/3/5	
Détection de l'environnement sonore	SurroundSupervisor XC	●	●	●	Analyse précise de l'environnement sonore et permet à AutoSurround XC de s'ajuster
Ajustements automatiques	Conversations dans une foule	●			Détection du son dans un environnement bruyant (discussion dans un restaurant)
	Conversations dans un petit groupe	●	●		Détection du son dans un environnement bruyant (en petit groupe)
	Musique	●	●		Programme musique avec égaliseur de son selon x types de musique
	Environnement calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme
	Conversations bruyantes	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant
	Conversations dans le calme	●	●	●	Détection d'un environnement calme pendant une discussion
	Conversations dans le bruit	●	●	●	Détection d'un environnement bruyant pendant une discussion
AutoSurround XC	7	6	4	Nombre de programmes automatiques	
Optimisation du son	Acclimatation intelligente	●	●	●	Evolution progressive du gain dans le temps
	SoundRestore XC	●	●	●	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	SurroundOptimizer XC	●	●	●	Optimise la compréhension vocale et le confort sonore dans les environnements bruyants.
	ConversationLift	●	●	●	Atténuation de la réverbération.
	Suppression des bruits parasites	●	●	●	Réduction haute résolution des sons gênants.
	Gestionnaire de l'effet larsen	●	●	●	Élimine les sifflements.
	Sound Impulse Manager	●	●	●	Atténuation des sons impulsionnels.
	Gestionnaire du bruit du vent	●	●	●	Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort
	DataLogging	●	●	●	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.